



LYMPHATOUCH®


**Monipuolinen työkalu helpottamaan potilaiden
ja kuntoutusammattilaisten elämää.**



LymphaTouch-teknologia



Alipaineen avulla voidaan aktivoida imuneste- ja verenkiertoa sekä kuljettaa turvotusnestettä.

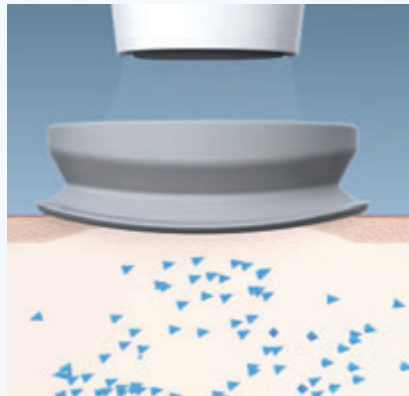

Alipaineen avulla luodaan kudokseen noste, joka on haastaavaa saada käsin aikaiseksi.

LymphaTouch on apunasi



Turvotus



**Pehmytkudos
ja faskia**



Arvet



Kipu



LymphaTouchin hyödyt



Akkukäyttöinen ja kompakti
– 8 tunnin toiminta-ajalla laitetta
voi käyttää niin klinikalla,
kotikäynneillä kuin kisamatkoilla.



Tarkka laiteohjattu alipaine
yksilölliseen ja miellyttävään
hoitoon, joka toimii myös
herkimmille.



Tutkitusti tehokas
– runsaasti kliinisiä tutkimuksia
ja positiivisia käyttäjäkokemuksia.



Optimoi työergonomiaa
ja säästää käsiäsi.



LymphaTouch-laitteessa yhdistyvät
säädettävä alipaine ja mekaanisen väri-
nän asetukset, jotka lisäävät entisestään
laitteen käyttömahdollisuuksia.



**LymphaTouchin
viisi erikokoista
suulaketta
mahdollistavat
kokonaisvaltaisen
hoidon eri osa-
alueille.**

LymphaTouchin hyöty on kliinisesti todistettu

Improve muscle tone, muscle stiffness and balance ability in stroke patients

Kim et al. 2018

Decrease pain and increase ROM in acute low back pain

Greenstein et al. 2019

Reduce limb volume significantly more than MLD in lymphedema patients

Lampinen et al. 2021, Leano et al. 2019; Vuorinen et al. 2013

Significant decrease of overall pain perception compared to MLD in postoperative elbow surgery

Weber et al. 2023

Enhance recovery after sports by reducing DOMS

Nummela & Mikkola 2013

Decrease discomfort and facial tightness of patients with facial palsy

Barth et al. 2017

Reduce swelling and increase range of motion pre- and post-operatively

Dresing et al. 2019; Fischer 2019; Saul et al. 2020

Reduce pain perception significantly in lymphedema patients

Ersoy et al. 2023

Tutustu tutkimukseen:



LymphaTouchista sanottua

LymphaTouch on mahdollistanut laajemmat mahdollisuudet turvotuksen hoitoon, vaikka en ole lymfaterapeutti. Lisäksi LymphaTouch on vähentänyt käsiin kohdistuvaa kuormitusta. Laite sopii monipuolisesti fysioterapeuteille, sillä se mahdollistaa monipuolisempaa manuaalista käsittelyä ja kivun hoitoa erilaisille asiakkaille.

Olen vastaanotolla tutkinut arven liikkuvuutta ja ihotuntoa sekä käyttänyt manuaalisten tekniikoiden lisäksi LymphaTouchia arven käsittelyyn. Pian huomasin, että LymphaTouch syrjäytti monissa tilanteissa manuaaliset tekniikat.

LymphaTouch-laite on helppokäyttöinen, käyttöliittymä on selkeä ja asiakkaat pitävät laitehoitoa miellyttävänä. Laitteen alipaineella luodaan noste, joka on tehokas mm. arpien ja kireiden kudosten hoidossa. Lisäksi LymphaTouch on hyvä työkalu, ja iso plussa on, että sen avulla on mahdollista saada omaan työhön kevennystä, jos tekee paljon manuaalista käsittelyä.

Arpi ei ole enää niin tiukka tai kutiseva, mitä se oli ennen hoitoa. Arpi on sileämpi ja välillä saatan jopa unohtaa sen olemassaolon, koska en tunne sitä samalla tavalla kuin ennen hoitoa. Hoitokäsittely tuntui todella pieneltä teolta siihen nähden, mikä muutos on tullut. Epäilin, että voiko tuommoinen mini-imuri toimia vanhaan arpeen, mutta epäilykseni olivat täysin väärät!

LymphaTouch-hoidon aikana näkee välittömästi, miten turvotus laskee, mikä rentouttaa koko yläraajan tehden siitä kivuttoman.



Usein kysytyt kysymykset

Kuinka kauan yksi LymphaTouch-hoito kestää?

Hoidon pituus määräytyy hoidettavan alueen ja tavoitteen mukaisesti. Paikalliset hoidot ovat usein kestoaltaan lyhyempiä kuin esimerkiksi turvotushoidot.

Kuinka usein LymphaTouch-hoitoja tulisi tehdä?

Hoitojakso määritellään aina yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti. Jo ensimmäisellä hoitokerralla voi saavuttaa tuloksia, mutta parhaimman tuloksen saavuttamiseen tarvitaan useampi hoitokerta.

Miten valitsen käytettävät asetukset?

Käytettävät asetukset määräytyvät hoidon tavoitteen mukaisesti. Turvotuksen hoidossa käytetään alle 180 mmHg:n alipainearvoja, kun taas pehmytkudos- ja arpikäsittelyssä alipaineet voivat olla 120–400 mmHg:n välillä. Turvotuksen hoidossa käytetään usein 60 Hz:n värinää, kun taas pehmytkuduskäsittelyssä käytetään 40 Hz:n ja 20 Hz:n värinää.

Voiko laitetta kokeilla ennen hankintapäätöstä?

Tarjoamme 14 vuorokauden maksuttoman koekäyttöjakson, joka sisältää etäopastuksen laitteen käyttöön ja jatkuvan tuen kliiniseltä asiantuntijaltamme koekäytön aikana. Pidempiaikaiseen kokeiluun suositellemme 6–12 kuukauden vuokrausta.



Suomalaista terveysteknologiaosaamista

Lymphatouch Oy on suomalainen vuonna 2005 perustettu terveysteknologiayritys. Lymphatouch Oy on sertifioitu ISO13485-standardin mukaiseksi lääkkinnällisten laitteiden valmistajaksi. Visionamme on olla maailman johtava valmistaja manuaaliseen terapiaan perustuvassa kuntoutuksessa.



lymphatouch.fi

Lymphatouch Oy
Y-tunnus: 1978977-7

Valimotie 13 A
00380 Helsinki

+358 10 423 7300
contact@lymphatouch.com